




Pulitrol

La pulitrice elettrolitica agevola la lucidatura e l'attacco dei campioni teneri o difficili da preparare con i metodi tradizionali (ad esempio alluminio, acciaio inox, rame). La PULITROL è disponibile nelle versioni da banco e portatile ed è costituita da una unità di alimentazione che gestisce la cella per lucidatura ed attacco chimico. L'unità di alimentazione permette il controllo e la visualizzazione dei parametri di lavoro sia per la lucidatura che per l'attacco: TENSIONE, CORRENTE, TEMPO e FLUSSO dell'ELETTROLITA. La pulitrice elettrolitica è fornita con un corredo di elettroliti fondamentali. È possibile corredare la macchina con tampone per effettuare la lucidatura e/o attacco anche su pezzi grandi.

Cella elettrolitica

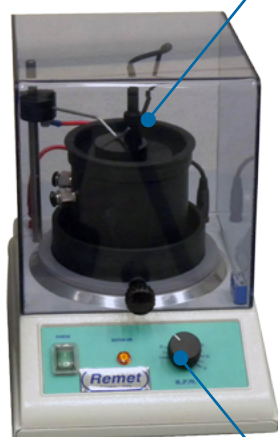

Regolatore di flusso

Pulitrol
da banco



Parametri lavoro

CARATTERISTICHE TECNICHE	Da BANCO	PORTATILE
Pulitura	0-110V a 0-8A	0-42V a 0-6A
Attacco	0-40V a 0-2,5A	0-20V a 0-2A
Timer (sec.)	0-60	0-60
Potenza Max (W)	900	300
Peso (Kg)	30	20
Alimentazione	220V - 50 Hz	
Dimensioni (mm): L	400 - 250	400
P	450 - 200	450
H	300 - 250	300

Minimo

La pulitrice MINIMO è un apparecchio portatile che consente un'agevole utilizzo nelle più svariate problematiche di preparazione metallografica in campo. La macchina è costituita da una centralina di alimentazione a bassa tensione (30V) con funzioni di comando e da un micromotore costruito interamente in acciaio inox in cui si può intercambiare la testina porta platello angolata con quella diritta. Grazie ad un interruttore incorporato nel micromotore è consentita l'accensione e lo spegnimento immediato senza bisogno di raggiungere la centralina. Dotata di un micromotore ad alte prestazioni e mandrino con apertura a pinza, posto sull'estremità della smerigliatrice, il platello di lavoro può essere sostituito senza l'impiego di alcuna chiave. Possibilità di regolare finemente la velocità fino a 14.200 giri/min. mediante una manopola posta sulla centralina conservando anche a bassi giri una coppia di consistente entità.

Regolazione velocità



Micromotore

Disco di lavoro

CARATTERISTICHE TECNICHE	MINIMO
Diametro disco (mm)	32 - 50
Manipolo	90° / diritto
Velocità Manipolo (rpm)	1400 ÷ 14200
Potenza Max (W)	60
Peso (Kg)	3,5
Alimentazione	220V Monofase
Alimentazione Manipolo	Bassa Tensione
Dimensioni (mm): L	144
P	218
H	116