


Secotron 200

La famiglia delle troncatrici SECOTRON è caratterizzata da tre assi per tagli di altissima precisione mediante carro longitudinale con controllo dello sforzo di lavoro e ottimizzazione automatica della velocità di avanzamento con PLC programmabile. Struttura in acciaio inox con coperchio in plexiglas. Regolazione verticale della mola e tavola trasversale per posizionamento preciso del campione. Particolarmente indicata per applicazioni in campo elettronico e della ricerca.

La SECOTRON è costruita nel pieno rispetto delle più restrittive norme di sicurezza:


- Pulsantiera di comando e Touch-screen 7 pollici (24 Vdc);
- Memoria salvataggio ricette di lavoro;
- Assistenza Remota
- Schermo trasparente in policarbonato che isola la zona di lavoro;
- Microinterruttore di sicurezza che arresta tutte le funzioni a coperchio aperto;
- Pulsante di arresto d'emergenza.

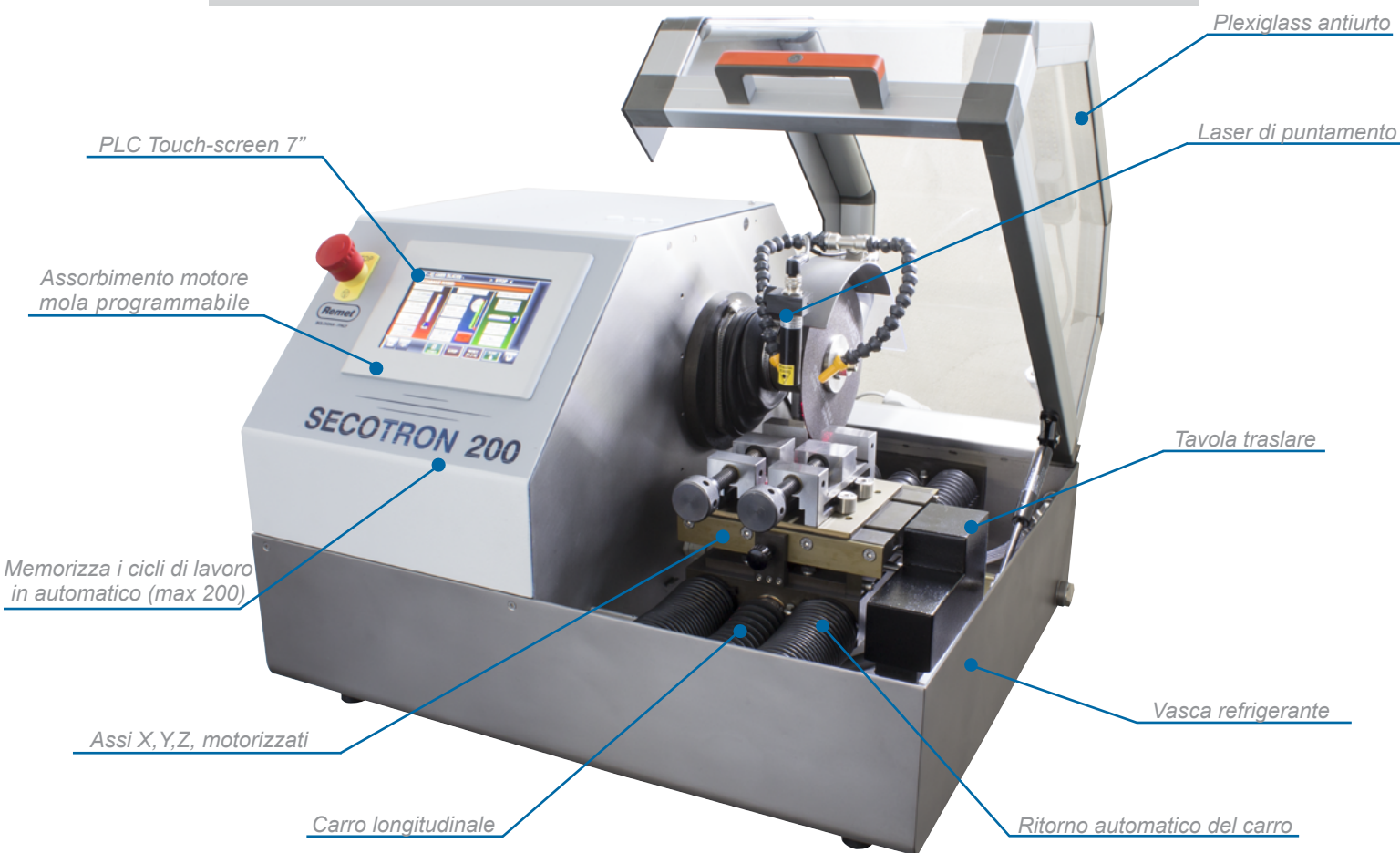


Morse Secotron



Micromorsa

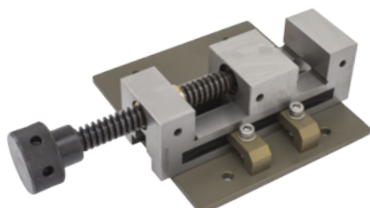


Morsa semplice

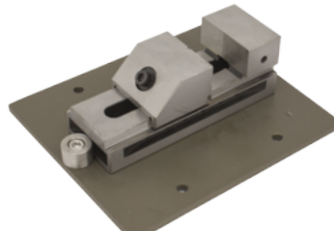


Morsa rapida




Morsa a dito

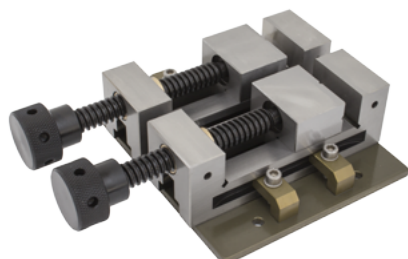


Doppia morsa

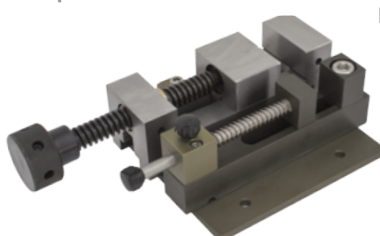

Morsa con morsetto

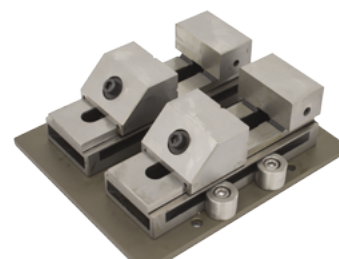

Doppia morsa rapida

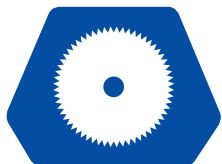

Secotron 300



CARATTERISTICHE TECNICHE	SECOTRON 200	SECOTRON 300
Diam.max mola da taglio (mm)	200	300
Diam.max troncabile (H x P)	60 x 150	100 x 300
Potenza motore (kW)	0,9	5,4
Sforzo max motore (A)	5	
Velocità mola (rpm)	500÷3.000	500÷3.500
Portata pompa (litri/min)	11	
Capacità vasca (litri)	10	15
Corsa longitudinale carro [Asse Y] (mm)	215	350
Corsa orizzontale tavola [Asse X] (mm)	50	50
Corsa verticale mandrino [Asse Z] (mm)	40	200
Peso (kg)	90	330
Alimentazione	220V monofase	
Dimensioni (mm): L x P x H	620 x 600 x 450	1000 x 1100 x 800