




TR 80 - 100 Evolution

Troncatrici da banco compatte ed economiche con struttura in acciaio inox, coperchio in plexiglas con telaio tubolare in alluminio, componenti in acciaio inox e ghisa rivestita con nichel chimico, mola montata direttamente sul motore in ghisa, comandi ergonomici sull'impugnatura, passaggio barra lato mola. Grande stabilità grazie al peso ed al refrigerante contenuto all'interno del corpo macchina. La Tr Evolution è costruita nel pieno rispetto delle più restrittive norme di sicurezza:

- pulsantiera di comando a bassa tensione (24 V);
- schermo trasparente in polycarbonato che isola la zona di lavoro;
- microinterruttore di sicurezza che arresta tutte le funzioni a coperchio aperto;
- pulsante di arresto d'emergenza.

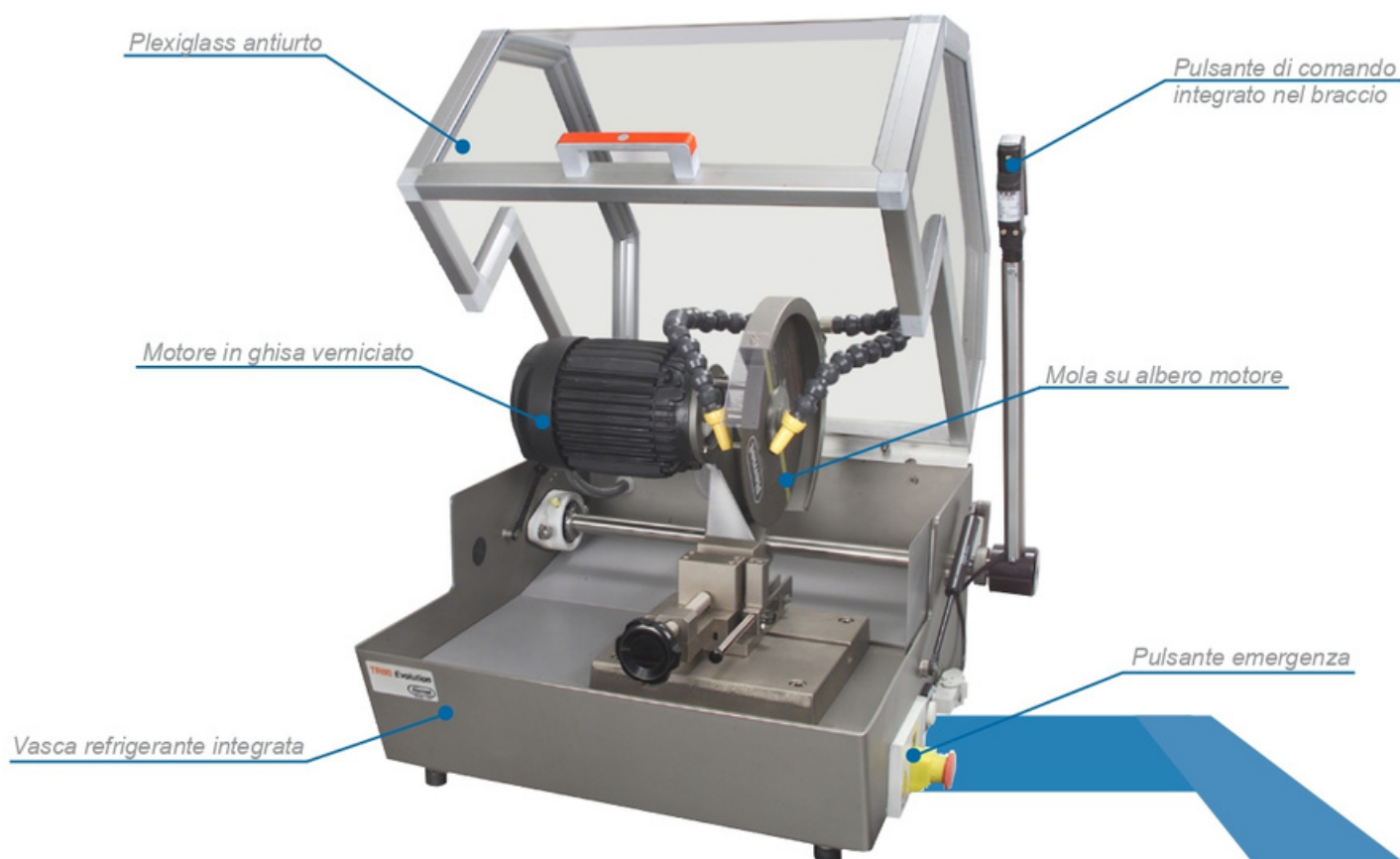

CARATTERISTICHE TECNICHE	TR 80 E	TR 100 E
Diam. max mola da taglio (mm)	250	300
Diam. max troncabile (mm)	80	100
Distanza Mandrino / Piano (mm)	230	240
Potenza motore (kW)	1,3	2,2
Velocità mola (giri/minuto)	2850	
Portata pompa (litri/minuto)	20	20
Capacità vasca (litri)	18	20
Carico di lavoro max (kg)	Manuale	Manuale
Alimentazione (V)	380 Trifase	380 Trifase
Peso (kg)	80	100
Dimensioni (mm) LxPxH	625 x 730 x 550	